

XL-20 Wireless Activity Monitor Users Manual



English | French | Spanish

AND
A&D Medical



What Does This Work With?

Use your ActiLink™ USB Transceiver with these



**Wellness
Connected™** products:



XL-20
Wireless Activity
Monitor



UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX
Wireless Automatic
Blood Pressure
Monitor



UC-324THW/UC-324TMW/UC-324THX
Wireless Precision
Scale



Getting Started

Before plugging the ActiLink™ USB Transceiver into your computer:



1. Go to www.wellnessconnected.com/getstarted
2. Activate your service plan to receive a registration email.
3. Click on the link within your registration email.
4. Enter in your account information.
5. Register each of your devices and install the ActiLink Client software.
6. Once registration is complete, secure your XL-20 to your footwear.
7. Take a short walk. Your XL-20 does not offload for the first time until you capture over 200 steps of continuous data.
8. Afterward, return to your computer to offload your data and view the results on wellnessconnected.com

Finding The Serial Number

Top

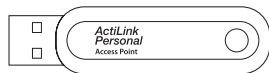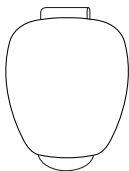

Bottom

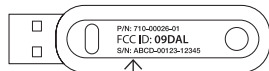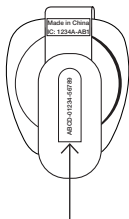

These are the numbers you need to enter at www.wellnessconnected.com during the registration process.

How it Works

The XL-20 utilizes a 3-axis accelerometer to accurately determine distance traveled, calories burned, activity time and total steps. It does not rely on a GPS system, instead providing full coverage and reliability for activities performed indoors or outdoors. The XL-20 will store approximately 10 to 30 days of activity depending on a user's activity levels, and must be worn on footwear (not on a belt or bag).



Recommended Activity Monitor Placement



Good Locations



Bad Locations

Using the ActiLink Software

The ActiLink Software will allow your ActiLink to receive data from the XL-20. The icon in the Windows system tray or Mac dock will indicate the software status.



Good Status:

Everything is working properly and devices can offload!



Warning Status:

The ActiLink Software does not detect an Internet connection and devices cannot be offloaded.



Error Status:

The ActiLink Software does not detect your ActiLink and devices cannot be offloaded.

System Check List

Below are some helpful hints to ensure your Wellness Connected System is working properly:

- ✓ The computer is powered on and not in Sleep, Suspended or Hibernation mode
- ✓ The ActiLink is plugged into the computer's USB port
- ✓ The ActiLink Software icon is blue and visible in your Windows system tray or Mac dock
- ✓ If you still do not see your data on WellnessConnected.com, try taking another short walk of 200 steps or more without stopping, return to your computer and click "refresh page"
- ✓ The XL-20 will offload data when it is "awake" and in range of the ActiLink – the XL-20 is awake when it is on your foot and you are moving, or if you tap it on a hard surface


To check the status of the XL-20, click on the ActiLink Software icon and locate your XL-20 in the Registered Devices list. There are 3 status levels:

- Sleeping** – the XL-20 is not detecting activity and has gone to sleep to save battery life
- Awake** – the XL-20 is detecting activity, but is not offloading data
- Syncing** – The XL-20 is actively offloading data through the ActiLink Software to Wellness Connected

Replacing the Battery


In the Devices Tab on wellnessconnected.com you can check the battery level of your XL-20. If the XL-20 icon is red, then the battery needs to be replaced. Battery life will differ dramatically based on your usage of the XL-20.

1. Using a small Phillips screwdriver, remove the four screws on the bottom of the XL-20.

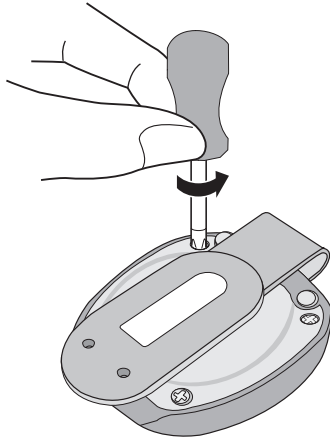

Replacing the Battery

2. Separate the two halves by pulling the clip away from the upper housing.
3. Using a flathead screwdriver, lift up the old battery and discard following local battery disposal regulations.
4. Replace with a new CR2032 coin cell battery, positive (+) facing up.
5. Reposition the back cover.
6. Replace the screws so they are tight, but do not over-tighten to the point of stripping the threads.

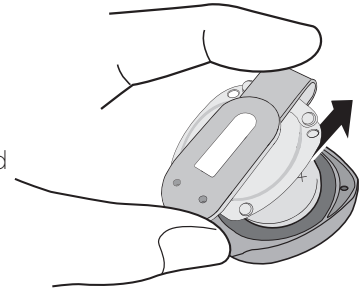

Warranty

This XL-20 Wireless Activity Monitor is covered by a 1 year warranty.

A&D Medical (the "Company") warrants to the first retail purchaser that this A&D Medical XL-20 Wireless Activity Monitor (the "Product") will be free from defects in material and workmanship for one year from the time of purchase. To obtain warranty service for such defects, return the Product, freight and insurance prepaid, together with satisfactory proof of date of purchase such as a sales receipt and shipping costs to:

A&D Medical
Attn: Warranty Department
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131

Include a check for return shipping and insurance. Contact A&D Medical at 1-888-726-9966 for appropriate shipping costs.

At A&D Medical's option, the Company will repair or replace any Product found to be defective and return it to you. (Any replacement product may be new or refurbished.) This warranty will not apply if the defect or malfunction results from: subjecting the Product to any but the specified voltage, modification, alteration or repairs of the Product by persons not authorized by A&D Medical; misuse, abuse, damage during transit or lack of reasonable care with respect to the Product; or failure to follow the written instructions enclosed with the Product.

THE WARRANTY AND REMEDY PROVIDED ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER EXPRESS WARRANTIES. IN NO EVENT SHALL A&D MEDICAL BE LIABLE FOR ANY LOSS, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, RESULTING FROM THE USE OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, WHETHER RESULTING FROM BREACH OF WARRANTY OR ANY OTHER LEGAL THEORY, EVEN IF A&D MEDICAL HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH INCONVENIENCE, DAMAGE OR LOSS.

Some states do not allow the exclusion of incidental or consequential damage, so that the above exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that may vary from state to state.

A&D Medical assumes no responsibility with regard to the use of this product. Every effort has been made to ensure that the information in this manual is accurate. A&D Medical is not responsible for printing or clerical errors.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operations. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this device.

Contact Information

For more information regarding use, care or servicing of your XL-20 Wireless Activity Monitor, contact:

The logo for A&D Medical, featuring the letters 'A' and 'D' in a large, bold, black, sans-serif font. The 'A' and 'D' are connected at the top, and the ampersand is positioned between them.

A&D Medical

A division of A&D Engineering, Inc.

1756 Automation Parkway

San Jose, CA 95131

Toll-Free: 1-888-726-9966

www.andmedical.com

Moniteur d'activités sans fil XL-20 Manuel d'utilisation



Français

A&D
A&D Medical



Avec quel appareil fonctionne-t-il?

Utilisez votre émetteur-récepteur USB ActiLink™ avec ces produits  Wellness Connected™ :



XL-20
Moniteur d'activités
sans fil



UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX
Tensiomètre
automatique sans fil



UC-324THW/UC-324TMW/UC-324THX
Balance de précision
sans fil


Comment démarrer

Avant de brancher l'émetteur récepteur USB ActiLink™ USB sur votre ordinateur :



1. Allez à www.wellnessconnected.com/getstarted.
2. Activez votre plan de service pour recevoir un courriel d'enregistrement.
3. Cliquez sur le lien se trouvant dans votre courriel d'enregistrement.
4. Entrez vos renseignements de compte.
5. Enregistrez chacun de vos dispositifs et installez le logiciel ActiLink Client.
6. Lorsque l'enregistrement est terminé, fixez votre XL-20 à votre chaussure.
7. Faites une courte marche. Votre XL-20 ne se décharge pas la première fois avant que vous ayez saisi plus de 200 pas de données continues.
8. Ensuite, retournez à votre ordinateur pour décharger vos données et voir les résultats sur wellnessconnected.com

Trouver le numéro de série

Dessus

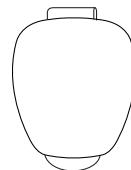

Dessous

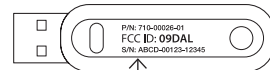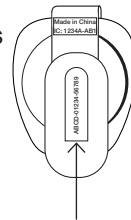

Voici les chiffres que vous devez entrer sur www.wellnessconnected.com lors du processus d'enregistrement.

Comment il fonctionne

Le XL-20 utilise un accéléromètre à trois axes pour déterminer avec précision la distance parcourue, les calories brûlées, la durée de l'activité et le nombre total de pas. Il ne se fie pas à un système GPS, il fournit plutôt une couverture et une fiabilité complètes pour les activités effectuées à l'intérieur comme à l'extérieur. Le XL-20 enregistrera environ de 10 à 30 jours d'activités selon les niveaux d'activité de l'utilisateur et il doit être porté sur une chaussure (pas sur une ceinture ou un sac).



Emplacement recommandé pour le moniteur d'activités



Bons emplacements



Mauvais emplacements

Utiliser le logiciel ActiLink

Le logiciel ActiLink permet à votre ActiLink de recevoir des données du XL-20. L'icône dans le plateau du système Windows ou station d'accueil Mac indique le statut du logiciel.



Bon statut : Tout fonctionne correctement et les dispositifs peuvent être déchargés!



Statut d'avertissement : le logiciel ActiLink n'a pas décelé de connexion Internet et les dispositifs ne peuvent pas être déchargés.



Statut d'erreur : le logiciel ActiLink n'a pas décelé votre ActiLink et les dispositifs ne peuvent pas être déchargés.

Liste de contrôle du système

Vous trouverez ci-dessous des conseils utiles pour s'assurer que votre système Wellness Connected fonctionne correctement :

- ✓ L'ordinateur est en marche et pas en mode de sommeil, d'arrêt temporaire ou d'hivernation
- ✓ L'ActiLink est branché dans le port USB de l'ordinateur
- ✓ L'icône du logiciel ActiLink est bleue et visible dans le plateau de votre système Windows ou la station d'accueil Mac
- ✓ Si vous ne voyez toujours pas vos données sur WellnessConnected.com, tentez de faire une autre courte marche de 200 pas ou plus sans arrêter, retournez à votre ordinateur et cliquez sur « rafraîchir la page »
- ✓ Le XL-20 déchargera les données lorsqu'il est « éveillé » et dans la portée d'ActiLink – le XL-20 est éveillé lorsqu'il se trouve sur votre pied et que vous vous déplacez, ou si vous le tapez sur une surface dure.


Pour vérifier le statut du XL-20, cliquez sur l'icône du logiciel ActiLink et trouvez le XL-20 dans la liste de dispositifs enregistrés. Il y a trois niveaux de statuts :

- Sommeil** – le XL-20 ne détecte aucune activité et il est passé au mode sommeil pour économiser la durée de vie de la pile
- Éveillé** – le XL-20 détecte une activité, mais ne décharge pas les données
- Synchronisation** – le XL-20 décharge activement les données par l'entremise du logiciel ActiLink vers Wellness Connected

Remplacement des piles


Dans l'onglet de l'appareil sur wellnessconnected.com, vous pouvez vérifier le niveau de la pile sur votre XL-20. Si l'icône de l'XL-20 est rouge, la pile doit alors être remplacée. La durée de vie de la pile va, de façon dramatique, être différente selon votre usage du XL-20.

1. À l'aide d'un petit tournevis Phillips, retirez les quatre vis sous la base de l'XL-20.

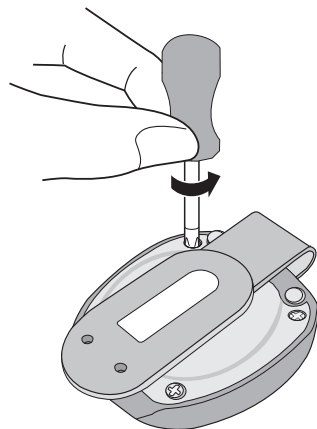

Remplacement des piles

- Séparez les deux moitiés en retirant la fixation du boîtier supérieur.
- En utilisant un tournevis à bout plat, soulevez la vieille pile et jetez-la en suivant les règles locales de mise au rebut des piles.
- Remplacez par une nouvelle pile bouton CR2032, en orientant le côté positif (+) vers le haut.
- Réinstallez le couvercle arrière.
- Insérez les vis de façon qu'elles soient serrées, mais ne serrez pas trop au point de briser les filets.

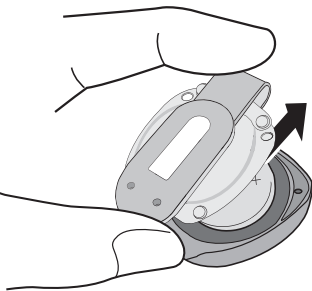

Garantie

L'émetteur récepteur Moniteur d'activités sans fil XL-20 est couvert par une garantie d'un an.

A&D Medical (* Entreprise *) garantit au premier acheteur au détail que l'émetteur Moniteur d'activités sans fil XL-20 (le « Produit ») sera libre de défauts de matériaux et de main d'œuvre pendant un an à compter de la date d'achat. Pour obtenir le service de garantie en cas de défectuosité, retournez le Produit, fret et assurance payés d'avance, avec une preuve satisfaisante de la date d'achat, comme le reçu de vente, et les frais d'expédition à :

A&D Medical
Attn : Warranty Department
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131 É.-U.

Inclure un chèque pour le fret et l'assurance de retour. Communiquez avec A&D Medical au 1-888-726-9966 pour obtenir la somme des frais d'expédition.

À la discrétion de A&D Medical, l'Entreprise réparera ou remplacera tout Produit s'avérant défectueux et vous le retournera. (Tous produit de remplacement peut être neuf ou remis en état.) Cette garantie sera considérée nulle si la cause du défaut ou du mauvais fonctionnement est l'une des suivantes : le Produit a été soumis à une tension autre que celle qui est précisée, des modifications, des altérations ou des réparations ont été apportées au Produit par des personnes non autorisées par A&D Medical; une mauvaise utilisation, de l'abus, des dommages pendant l'expédition ou un manque de soin raisonnable relativement au Produit; ou le non-respect des directives écrites qui accompagnent le Produit.

LA GARANTIE ET LE REMÈDE FOURNIS CI-DESSUS SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES. A&D MEDICAL NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE, DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS OU INDIRECTS, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, EN RAISON D'UNE VIOLATION À LA GARANTIE OU TOUTE AUTRE THÉORIE LÉGALE, MÊME SI A&D MEDICAL A ÉTÉ AVISÉ DE LA POSSIBILITÉ D'UN TEL INCONVÉNIENT, DE TELS DOMMAGES OU D'UNE TELLE PERTE.

Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion des dommages consécutifs ou indirects, par conséquent les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère des droits légaux précis et vous pouvez aussi avoir d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

A&D Medical n'assume aucune responsabilité quant à l'utilisation de ce Produit. Tout effort a été déployé pour s'assurer que les renseignements se trouvant dans ce manuel sont exacts. A&D Medical n'assume aucune responsabilité pour les erreurs d'impression ou de rédaction.

Cet appareil est conforme au paragraphe 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer de l'interférence nocive; (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence pouvant causer un fonctionnement indésirable. Les changements ou les modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet appareil.

Pour des renseignements supplémentaires concernant l'utilisation, l'entretien ou la réparation de votre acheteur au détail que l'émetteur Moniteur d'activités sans fil XL-20, veuillez communiquer avec :



Une division de A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
É.-U. Sans frais : 1-888-726-9966
www.andmedical.com

Si vous avez besoin d'aide pour l'installation ou le fonctionnement. Nous pouvons vous aider! Veuillez nous appeler EN PREMIER avant de communiquer avec votre détaillant à la Ligne de service à la clientèle A&D Medical 1-888-726-9966 (sans Frais). Un représentant spécialement formé vous aidera.



Une division de A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
www.andmedical.com

© 2011 A&D Medical. Tous droits réservés.

LifeSource, le logo de LifeSource, Wellness Connected et le logo de Wellness Connected sont des marques de commerce de A&D Medical enregistrées aux É.-U.

La balance de précision UC-324THW et l'émetteur-récepteur USB ActiLink sont couverts par un ou plusieurs des numéros de brevet américains suivants : 6336365, 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6560903, 6611789, 6536139, 6876947, 6882965, 7187924, ainsi que par des brevets en instance.

LES SPÉCIFICATIONS PEUVENT CHANGER SANS PRÉAVIS.

Imprimé en Chine. 03/2011

I-MAN-XL-20 REV. b

Monitor inalámbrico de actividad XL-20 Manual del usuario



Español

A&D
A&D Medical



¿Con qué funciona?

Utilice el transmisor/receptor USB de ActiLink™ con estos productos  **Wellness Connected™**



XL-20
Monitor inalámbrico de actividad



UA-851THW/UA-851TMW/UA-851THX
Monitor automático inalámbrico de presión arterial



UC-324THW/UC-324TMW/UC-324THX
Balanza inalámbrica de precisión


Cómo empezar

Antes de conectar el transmisor/receptor USB de ActiLink™ a la computadora:



1. Visite www.wellnessconnected.com/getstarted
2. Active el plan de servicio para recibir un correo electrónico de registro.
3. Haga clic en el enlace que aparece en el correo electrónico de registro.
4. Ingrese en la información de su cuenta.
5. Registre cada uno de los dispositivos e instale el software ActiLink Client.
6. Una vez finalizado el registro, asegure el XL-20 a su calzado.
7. Dé unos pocos pasos. Su XL-20 no descarga la primera vez hasta que dé más de 200 pasos de datos ininterrumpidos.
8. Luego, vuelva a su computadora, descargue sus datos y vea los resultados en wellnessconnected.com

Ubicación del número de serie

Parte superior

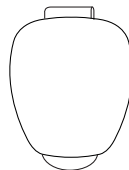

Parte inferior

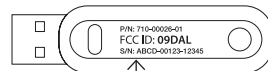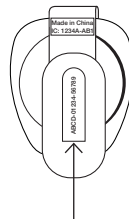

Estos son los números que necesita para ingresar en www.wellnessconnected.com durante el proceso de registro.

El XL-20 utiliza un acelerómetro de 3 ejes para determinar la distancia exacta recorrida, las calorías quemadas, el tiempo de actividad y el total de pasos. No depende de un sistema GPS, pero brinda total cobertura y fiabilidad de las actividades realizadas en el interior o al aire libre. El XL-20 almacena aproximadamente de 10 a 30 días de actividad, según los niveles de actividad del usuario. Se debe utilizar sobre el calzado (no en un cinturón o cartera).



Disposición recomendada para el Monitor de Actividad



Lugares apropiados



Lugares apropiados

El Software ActiLink permite que su ActiLink reciba los datos desde el XL-20. El ícono en la bandeja de sistema de Windows o sistema operativo de Mac (dock) indicará el estado del software.



Buen estado: ¡Todo funciona correctamente y los dispositivos se pueden descargar!



Estado de advertencia: El Software ActiLink no detecta una conexión a Internet y los dispositivos no se pueden descargar.



Estado de error: El Software ActiLink no detecta su ActiLink y los dispositivos no se pueden descargar.

Lista de control del sistema

A continuación encontrará algunos consejos útiles para garantizar que su sistema Wellness Connected funcione correctamente:

- ✓ La computadora se enciende y no está en modo Suspendido o Hibernación
- ✓ ActiLink se conecta al puerto USB de la computadora
- ✓ El icono del Software ActiLink es azul y visible en la bandeja del sistema Windows o sistema operativo de Mac (dock)
- ✓ Si todavía no puede visualizar sus datos en WellnessConnected.com, salga a dar otro paseo corto de 200 pasos o más sin detenerse, regrese a su computadora y haga clic en "actualizar página".
- ✓ El XL-20 descargará datos cuando esté "despierto" y dentro del alcance de ActiLink. XL-20 está despierto cuando se coloca en su pie y usted está en movimiento, o si lo golpea contra una superficie dura


Para controlar el estado de XL-20, haga clic en el icono del Software ActiLink y localice su XL-20 en la lista de Dispositivos Registrados. Existen 3 niveles de estado:

- Dormido:** – el XL-20 no detecta actividad y se duerme para ahorrar vida útil de la batería
- Despierto:** – el XL-20 detecta actividad, pero no está descargando datos
- Sincronizado:** – el XL-20 está cargando datos activamente mediante el Software ActiLink en Wellness Connected

Reemplazo de las baterías


Puede verificar el nivel de la batería de su XL-20 en la pestaña de dispositivos (Devices) en wellnessconnected.com. Si el icono XL-20 está en rojo, entonces la batería debe reemplazarse. La duración de la batería difiere notablemente según el uso del XL-20.

1. Con un destornillador pequeño de punta en cruz (Phillips) extraiga los cuatro tornillos de la parte inferior del XL-20.

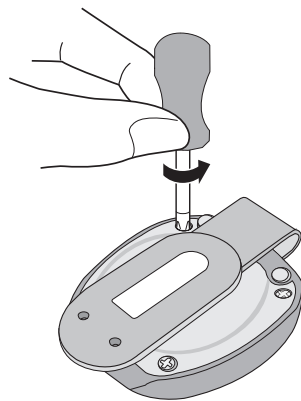

Reemplazo de las baterías

2. Separe las dos mitades tirando el sujetador hacia fuera de la carcasa superior.
3. Con un destornillador de cabeza plana levante la batería vieja y deséchela. Para ello, tenga en cuenta las reglamentaciones locales para la eliminación de baterías.
4. Reemplace por una nueva batería plana CR2032, con el lado positivo (+) hacia arriba.
5. Vuelva a colocar la tapa posterior.
6. Coloque los tornillos de manera que queden ajustados, pero no los apriete demasiado al extremo de dañar las roscas.

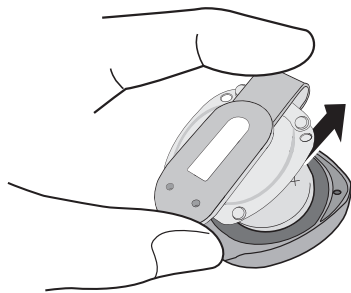

Garantía

Monitor inalámbrico de actividad XL-20 está garantizado por 1 año.

A&D Medical (la "Empresa") garantiza al primer comprador, durante un año a partir de la fecha de la compra, que este monitor inalámbrico de actividad XL-20 de A&D Medical (el "Producto") no tiene defectos en los materiales utilizados para su fabricación ni en el proceso de manufactura. Para obtener los servicios de garantía por estos defectos debe enviar el producto, con servicio de envío prepagado y asegurado, junto con el comprobante fehaciente de la fecha de compra, como el recibo de pago del vendedor, y los costos de envío a la siguiente dirección:

A&D Medical
Attn: Warranty Department
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131

A&D Medical Attn: Warranty Department 1756 Automation Parkway San Jose, CA 95131

Incluya un cheque que cubra el envío del producto y el seguro. Comuníquese con A&D Medical al 1-888-726-9966 para obtener los costos de envío adecuados.

A&D Medical puede elegir entre reparar o reemplazar los Productos defectuosos, y enviárselos a usted. (Los productos reemplazados serán nuevos o reparados). Esta garantía no tiene validez si el defecto, o funcionamiento defectuoso, resulta de: sometimiento del Producto a un voltaje distinto al especificado; modificación, alteración o reparación del Producto por parte de personas no autorizadas por A&D Medical; utilización incorrecta, abuso o daño durante el transporte o falta de cuidado razonable con respecto al Producto o falta de cumplimiento de las instrucciones escritas adjuntas al Producto.

LA GARANTÍA Y LAS REPARACIONES QUE SE DESCRIBEN ANTERIORMENTE EXCLUYEN Y REEMPLAZAN TODA OTRA GARANTÍA EXPRESA. EN NINGÚN CASO A&D MEDICAL SERÁ RESPONSABLE POR PERDIDAS O DAÑOS EVENTUALES O CONSECUENTES QUE SEAN EL RESULTADO DEL USO O DE LA IMPOSIBILIDAD DE USAR EL PRODUCTO, YA SEA QUE RESULTEN DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS O DE TODO OTRO FUNDAMENTO LEGAL, INCLUSO SI SE INFORMÓ A A&D MEDICAL SOBRE LA POSIBILIDAD DE ESTOS INCONVENIENTES, DAÑOS O PERDIDAS.

Algunos estados no permiten la exclusión de daños eventuales o consecuentes; por lo tanto, es posible que la exclusión descrita anteriormente no sea aplicable. Esta garantía le otorga derechos legales particulares y es posible que pueda ejercer otros derechos que pueden variar de estado en estado.

A&D Medical no asume responsabilidad alguna en relación con el uso de este producto. Se han hecho todos los esfuerzos necesarios para asegurar que la información de este manual sea correcta. A&D Medical no se hace responsable de errores administrativos o de impresión.

Este dispositivo cumple con las disposiciones de la Parte 15 de las Normas de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC). El funcionamiento del dispositivo está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe causar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar todas las interferencias recibidas, incluidas aquellas que podrían causar un funcionamiento indeseado. Los cambios o las modificaciones que no sean expresamente aprobados por el responsable de cumplir con las disposiciones antes mencionadas podrían anular la facultad del usuario de operar el dispositivo.

Información de contacto

¡Importante!

Para obtener más información sobre la utilización, el mantenimiento o la reparación Monitor inalámbrico de actividad XL-20, comuníquese con:

The logo for A&D Medical, featuring the letters 'A' and 'D' in a bold, black, sans-serif font, with an ampersand between them.

A&D Medical

Una división de A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
Número gratuito: 1-888-726-9966
www.andmedical.com

Si necesita ayuda con la instalación u operación. ¡Podemos ayudarlo! Llámenos ANTES de contactar a su vendedor a Línea de Salud de A&D Medical 1-888-726-9966 (gratis en EE. UU). Un representante especialmente capacitado lo ayudará.

The logo for A&D Medical, featuring the letters 'A' and 'D' in a bold, black, sans-serif font, with an ampersand between them.

A&D Medical

Una división de A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
www.andmedical.com

© 2011 A&D Medical. Reservados todos los derechos.

LifeSource, el logotipo de LifeSource, Wellness Connected y el logotipo de Wellness Connected son marcas comerciales de A&D Medical registradas en EE. UU.

La Balanza de Precisión UC-324THW y el Transceptor USB ActiLink están cubiertos por una o más de las patentes estadounidenses n.º 6336365, 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6560903, 6611789, 6536139, 6876947, 6882955, 7187924 y patentes pendientes.

LAS ESPECIFICACIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.

Impreso en China 03/2011

H-MAN-XL-20 REV. b

Important!

If you need assistance with the set-up or operation, we can help! Please call us **FIRST** before contacting your retailer at A&D Medical Customer Service Line 1-888-726-9966 (Toll Free). A specially trained representative will assist you.



A&D Medical

**A division of A&D Engineering, Inc.
1756 Automation Parkway
San Jose, CA 95131
www.andmedical.com**

© 2011 A&D Medical. All rights reserved.
LifeSource, the LifeSource logo, Wellness Connected, and the Wellness Connected logo are trademarks of A&D Medical registered in the U.S.

THE XL-20 WIRELESS ACTIVITY MONITOR is covered by one or more of U.S. patent numbers 6336365, 6018705, 6052654, 6493652, 6298314, 6560903, 6611789, 6536139, 6876947, 6882955, 7187924 and patents pending.

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.

Printed in China 03/2011

I-MAN-XL-20 REV. b